



CLA 1



GB User guide index p.2

F Sommaire de la notice d'utilisation p.2

EXTRA EARPIECE



INDEX

DESCRIPTION	3
SETTING UP	
- Connecting the CLA 1	5
- Select your phone	5
- Select the working mode (Handset / headset)	5
- How to use the handset	6
- How to use the earpiece	6
- How to use the headset (option)	6
TROUBLE SHOOTING	7
GUARANTEE	8




SOMMAIRE


DESCRIPTION	9
REGLAGES	
- Connecter le CLA 1	11
- Sélectionner le type de téléphone	11
- Sélectionner le mode de fonctionnement (combiné /casque)	11
- Utilisation du combiné	12
- Utilisation de l'écouteur	12
- Utilisation du casque (option)	12
PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT	13
GARANTIE	14

DESCRIPTION

DESCRIPTION

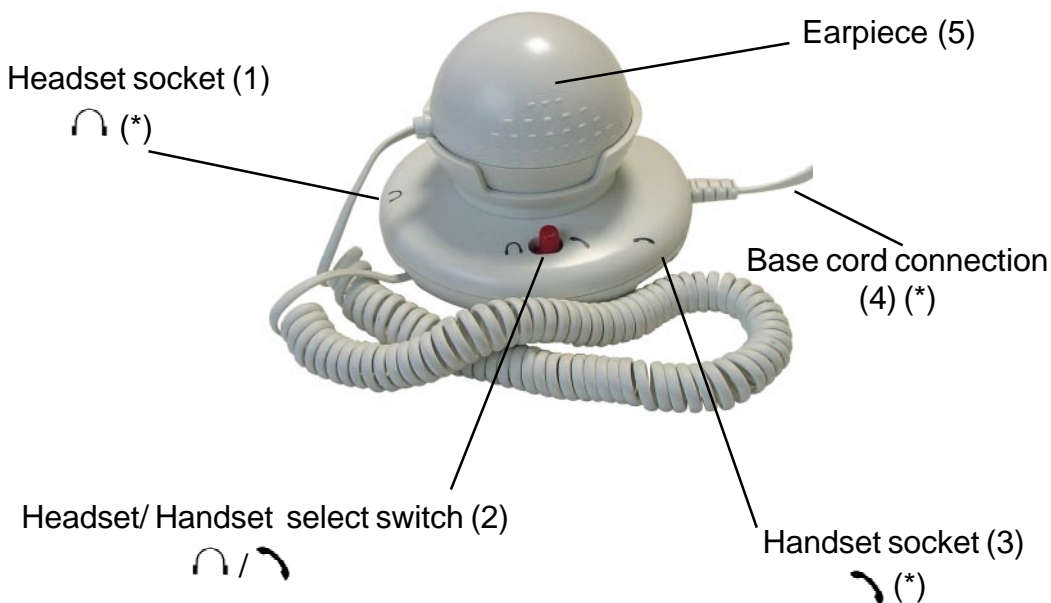

Headset hook/Rack mounting

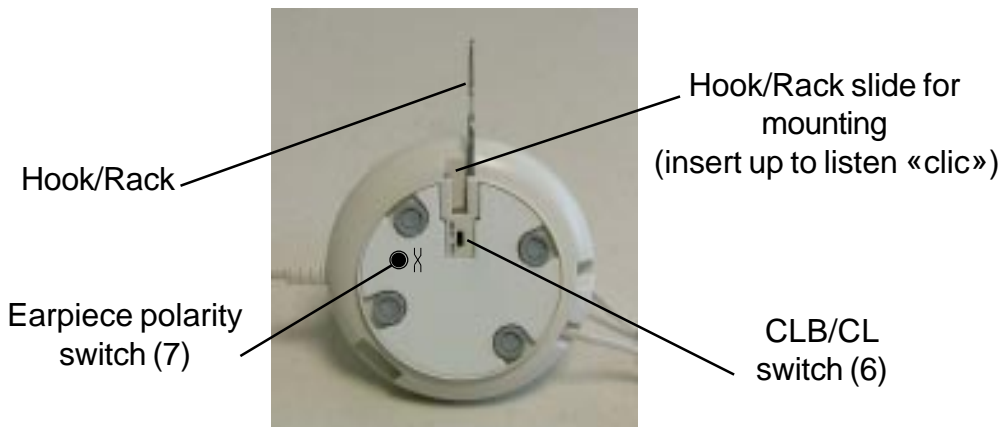

(*) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.

DESCRIPTION

View of the CLA 1 after Hook/Rack mounted:



View of the CLA 1 with a headset on Hook/Rack:





Note: Headset is an option and is not supplied with the CLA 1.
Geemarc headset reference : **HEADSCL_BLK**

SETTINGS

SETTING

Connecting the CLA 1



To connect the **CLA 1** to your phone please follow the instructions carefully. See pictures on page 3 to locate the plugs and socket.

- 1 - Disconnect your handset from your phone base.
- 2 - Connect the **CLA 1** short curly cord (4) to the handset phone socket.
- 3 - Connect the handset curly cord to the **CLA 1** handset socket  (3) .
- 4 - Connect the headset (option) to the headset socket  (1) .

Select your phone

To have the best receiving level set the switch **CL-B/CL** (6) located under the **CLA 1** to the desired position, the **CL-B** position must be used for phones with handset boost feature (like **CL 200, CL 400, CL 500**) and **CL** position for normal phone (like **CL 50, CL 100**).

Select the function mode (Handset / headset)


You can select the function mode by using the switch (2) located on the **CLA 1** top to select the handset by setting the switch to the  position and the headset by setting the switch to the  .

The **CLA 1** is now ready to use.

Note: The **CLA 1** functionality are only guaranteed with Geemarc telephones **CL 50 to CL 500** range.

SETTINGS

How to use the handset


Make sure that the switch (2) is set to  . When you receive a call lift the handset from the cradle and speak, at the end of the call replace the handset in the phone cradle.

How to use the earpiece

When you receive a call, lift the handset from the cradle and speak. A second person can lift the earpiece and use it as a handset to listen to the conversation. Or you can put the earpiece to your other ear to improve your reception. At the end of the call simply replace the handset and the earpiece in their respective cradles.

Note: In this case, earpiece and handset can be used at the same time.

How to use the headset (headset is not supplied)


When you receive a call, lift your handset and place it near the phone base, make sure that the switch (2) is set to  . Then speak and listen your correspondent with your headset (Geemarc headset ref: **HEADSCL_BLK**) . At the end of the call replace the handset in the phone cradle.

Note: In this case, earpiece and headset can be used at the same time.


TROUBLE SHOOTING

IMPORTANT NOTICE:

The **CLA 1** will work with all **CLEAR SOUND 50** to **500** series. It may happen that **CLA 1** does not work with telephones from others suppliers, we cannot guarantee the functionality of the **CLA 1** in this case.

Note: if you get a loud noise oscillation or crackling when connecting the headset simply press the switch  (7) located under the **CLA 1** to avoid the problem (earpiece polarity).

TROUBLE SHOOTING

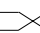- No dial tone: Make sure everythings is connected in the correct plugs.
- The receiving level is too low or too high: Check the **CL-B/CL** switch located under your **CLA 1**.
- Crackling into the headset or earpiece: check the  switch (7) located under the **CLA 1**.
- Nothing happens after following the instructions above: check your telephone and the network connection.



For product support and help visit our website at www.geemarc.com

telephone 01707 384438

or fax 01707 372529

GUARANTEE

GUARANTEE

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of one year. During this time, all repairs or replacements (at our option) are free of charge. Should you experience a problem then contact our helpline or visit our website at www.geemarc.com. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorised Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.

DECLARATION: Geemarc Telecom SA Hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EEC and in particular article 3 section 1a, 1b and section 3.




For product support and help visit our website at www.geemarc.com

telephone 01707 384438
or fax 01707 372529




DESCRIPTION

DESCRIPTION

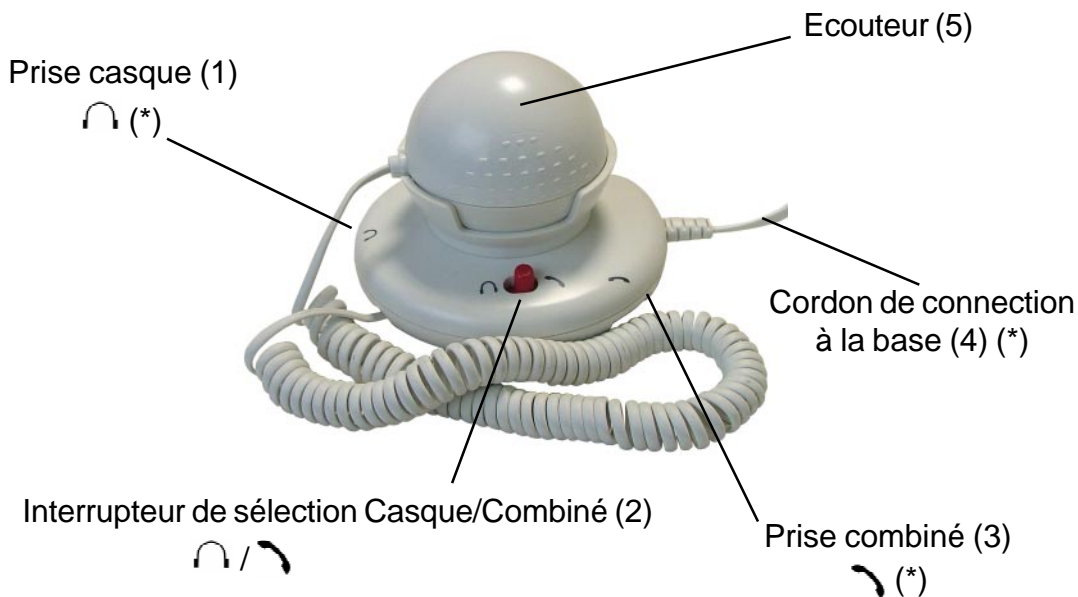

Montage du support casque

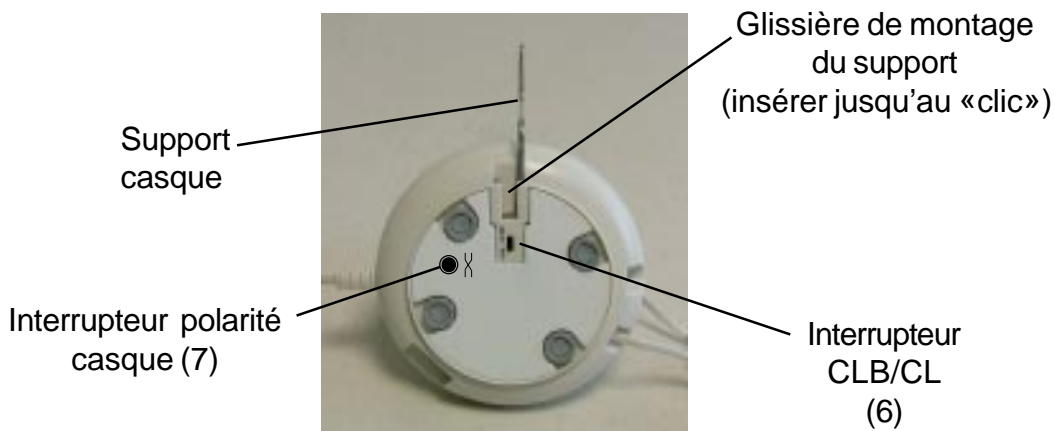

(*) Classée TRT-3 selon la norme EN60950

DESCRIPTION

Vue du CLA 1 avec son support casque:



Vue du CLA 1 avec un casque sur son support:





Note: Le casque est une option et n'est pas fourni avec le **CLA 1**.
Référence casque Geemarc : **HEADSCL_BLK**

REGLAGES

REGLAGES ET UTILISATION

Connecter le CLA 1



Pour connecter le **CLA 1** à votre téléphone suivez simplement les instructions suivantes. Aidez-vous des photos page 3 pour effectuer les connections.

- 1 - Déconnectez le combiné de la base de votre téléphone.
- 2 - Connectez le petit cordon du **CLA 1** (4) sur la prise combiné de votre base.
- 3 - Connectez le cordon de votre combiné sur la prise de connection combiné du **CLA 1**  (3) .
- 4 - Connectez le casque dans la prise casque du **CLA 1**  (2).

Sélectionnez votre téléphone

Pour obtenir les performances correspondant à votre téléphone, positionnez l'interrupteur **CL-B/CL** (6) situé en dessous du **CLA 1** sur la position désirée, la position **CL-B** et destinée pour les téléphones ayant la fonction boost sur le combiné (**CL200**, **CL400**, **CL500**) et la position **CL** pour les combinés normaux (**CL 50**, **CL 100**, **BB 100**, **BB 300**).


Selectionnez le mode de fonctionnement (combiné / casque)

Vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement en utilisant l'interrupteur (2) situé sur le dessus du **CLA 1** pour sélectionner l'un ou l'autre mode de fonctionnement. Positionnez l'interrupteur sur la position  pour utiliser le combiné et sur la position  pour utiliser le casque. Le **CLA 1** est maintenant prêt à être utilisé.

Note: Nous garantissons le fonctionnement du **CLA 1** seulement qu'avec les téléphones de la gamme **CL50** à **CL500** et **BB100** à **BB300**.

DESCRIPTION

Utilisation du combiné


Vérifiez que l'interrupteur (2) est positionné sur . Lorsque vous recevez un appel décrochez le combiné et parlez. A la fin de la conversation replacez le combiné sur son support.

Utilisation de l'écouteur

Lorsque vous recevez un appel, décrochez votre combiné et parlez. Une deuxième personne peut prendre l'écouteur et l'utiliser tout simplement comme un combiné pour écouter la conversation. Vous pouvez aussi le porter à votre oreille pour augmenter le niveau de réception. A la fin de la conversation, replacez tout simplement le combiné et l'écouteur sur leur supports respectifs.

Note: Vous pouvez utiliser dans ce cas l'écouteur et le combiné en même temps.

Utilisation du casque (non fourni)


Lorsque vous recevez un appel, décrochez votre combiné et placez-le sur le côté de votre téléphone. Vérifiez que l'interrupteur (2) est placé sur la position . Vous pouvez parler et écouter votre correspondant avec le casque (référence casque Geemarc: **HEADSCL_BLK**). A la fin de la conversation, replacez simplement le combiné sur son support.

Note: Vous pouvez utiliser dans ce cas l'écouteur et le casque en même temps.


PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

NOTE IMPORTANTE:

Le **CLA 1** fonctionne avec toute la série des **CLEAR SOUND 50 à 500** et **BB100 à BB300**. Il peut arriver que le **CLA 1** ne fonctionne pas avec des téléphones provenant d'autres fournisseurs, nous ne garantissons pas le fonctionnement du **CLA 1** dans ces conditions.

Note: Si vous avez un sifflement ou des craquements lorsque vous connectez le casque, appuyez simplement sur l'interrupteur (7)  situé en dessous pour annuler le problème.

PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

- Pas de tonalité: vérifiez que tous les cordons soient correctement connectés.
- Le niveau de réception est trop faible ou trop fort: vérifiez la position du switch **CL-B/CL** (6) en dessous du **CLA 1**.
- Craquements ou bruit dans le casque ou l'écouteur: appuyez sur l'interrupteur  (7) sous le **CLA 1**.
- Si rien ne fonctionne après les vérifications ci-dessus, vérifiez votre téléphone et votre connection au réseau téléphonique.



TEL. SERVICE APRES VENTE :
03 28 58 75 99

Pour tout renseignement technique ou toute commande visitez
notre site web sur www.geemarc.com.

Parc d'Activités du Basroch
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe

GARANTIE

GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel et avant de nous retourner votre appareil, contactez notre service après vente de : 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 du Lundi au Jeudi et de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 le Vendredi.

TEL. SERVICE APRES VENTE :
03 28 58 75 99

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38).



TEL. SERVICE APRES VENTE :
03 28 58 75 99

Pour tout renseignement technique ou toute commande visitez
notre site web sur www.geemarc.com.

Parc d'Activités du Basroch
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe

